

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краткое описание продукта

Antinitus® представляет собой способ уменьшения дискомфорта от шума в ушах. Препарат создан и произведен в Швеции в результате многолетних исследований и разработок. Antinitus® удобен в использовании благодаря безболезненному способу применения. Antinitus® изготовлен из материалов, оказывающих мягкое воздействие на кожу.

Шум в ушах (тиннитус) является распространенной проблемой, которая затрагивает приблизительно от десяти до пятнадцати процентов населения. Тиннитус - это ощущение звука в одном или обоих ушах, или в голове, при отсутствии соответствующего внешнего источника звука.

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования Antinitus®. Если у вас возникли вопросы или опасения по поводу вашего заболевания, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Что входит в упаковку Antinitus®?
2. Для чего используется Antinitus®?
3. Как работает Antinitus®?
4. Предостережения и меры предосторожности
5. Как используется Antinitus®?
6. Хранение
7. Контактная информация
8. Применение

1. Что входит в упаковку Antinitus®?

Упаковка содержит внутреннюю коробку с 21 пластырями Antinitus® и инструкцию по применению.

2. Для чего используется Antinitus®?

Antinitus® используется для уменьшения дискомфорта от шума в ушах у **взрослых**. Пластыри Antinitus® являются одноразовыми изделиями, которые следует менять каждый день для достижения наилучшего результата.

3. Как работает Antinitus®?

Antinitus® представляет собой пластырь, предназначенный для уменьшения дискомфорта от шума в ушах. Пластырь содержит уникальный (ую) растр/линзу, который (ая) создает организованный сигнал, который, как ожидается, прямо или косвенно, регулирует функции нервной системы в системе слуха для уменьшения дискомфорта от шума в ушах.

Клинические исследования и клинический опыт показывают, что Antinitus® может ослабить симптомы шума в ушах. Кроме того, Antinitus® чрезвычайно безопасен в использовании.

4. Предостережения и меры предосторожности

– Если вы, по неизвестной причине, страдаете от шума в ушах и одностороннего нарушения слуха (неодинаковый уровень слуха в обоих ушах) или, если у вас наблюдается пульсирующий тиннитус (как ваш пульс) или другие симптомы нарушений функции уха, вам необходимо проконсультироваться с врачом, прежде, чем начать использование Antinitus®.

– Antinitus® представляет собой способ только для снятия дискомфорта от шума в ушах.

– Antinitus® не был исследован на детях и поэтому не должен использоваться для уменьшения дискомфорта от шума в ушах у детей возрастом до 18 лет, если только он не назначен врачом.

– Antinitus® не должен использоваться на поврежденной или раздраженной коже.

– При появлении раздражения на коже, следует прекратить использование Antinitus® до тех пор, пока не пройдет раздражение. Лечение может быть возобновлено, как только исчезнет раздражение.

– Если у вас возникла аллергическая реакция при использовании Antinitus®, вам следует прекратить использовать изделие и обратиться к врачу.

– Не следует использовать Antinitus® в сочетании с другими способами лечения шума в ушах, если только это не назначено врачом.

– Не установлено влияние пластыря Antinitus® на лекарственные препараты, поэтому он может использоваться, если только врач не рекомендовал воздержаться от его применения.

– Не установлено влияние пластыря Antinitus® на слуховые аппараты, поэтому он может использоваться, если только врач не рекомендовал воздержаться от его применения.

– Симптомы шума в ушах могут усугубляться в начале лечения, но они обычно проходят через несколько дней.

– Не рекомендуется использовать Antinitus® во время беременности или кормления грудью, так как клинические исследования в этой группе не проводились.

– Эффект от действия Antinitus® отличается у отдельных людей и наблюдается не у всех.

- Не используйте поврежденные пластыри Antinituss® или пластыри из поврежденной упаковки.
- Пластыри не должны использоваться повторно.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Для справки:

- Antinitus® является медицинским изделием, имеющим маркировку CE.

5. Как используется Antinitus®?

Применяйте пластыри Antinitus®, как описано в инструкциях по ПРИМЕНЕНИЮ. Пластырь следует менять ежедневно и носить в течение 24 часов. Не используйте пластырь Antinitus® более 21 дня подряд. Используйте только один пластырь за один раз.

Применяйте пластырь за ухом, в котором вы ощущаете симптомы шума. Если у вас проблемы с обоими ушами, применяйте пластырь за тем ухом, в котором вы ощущаете более сильные симптомы. Желательно менять пластырь ежедневно примерно в одно и то же время, например, после завтрака или принятия душа, что поможет вам вспомнить о необходимости использования нового пластыря Antinitus®.

После того, как пластырь был распечатан, он должен быть немедленно использован и меняться каждый день. Пластырь не может быть использован повторно, и эффективность не может быть гарантирована. Поскольку шум в ушах у разных людей проявляется по-разному, то эффект от его использования может отличаться. Результаты исследования показали, что эффект смягчения дискомфорта увеличивается после завершения лечения.

Во время лечения вы можете жить обычной жизнью и не вносить в нее никаких изменений, например, во время тренировок, когда вы находитесь на улице или в помещении. Кроме того, нет необходимости менять прическу или способ укладки волос.

Повторяющийся шум в ушах

Если симптомы шума в ушах усугубляются/возвращаются после курса лечения, использование Antinitus® может быть возобновлено через четыре недели после окончания предыдущего цикла лечения.

6. Хранение

Храните пластыри в коробке, в которой они поставляются, в сухом месте при комнатной температуре (от 18 °C до 25 °C). Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Срок годности указан на упаковке. После того, как пластырь был открыт, он должен быть немедленно использован и меняться каждый день. Использованные пластыри Antinitus® могут утилизироваться как обычные бытовые или сжигаемые отходы. Коробка и инструкции по использованию после проведения курса лечения могут утилизироваться как макулатура.

7. Контактная информация

Производитель:
Antinitus AB
Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm
Sweden

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.antinitus.com

ПРИМЕНЕНИЕ


1. Применяйте пластырь Antinitus® за ухом, в котором вы ощущаете симптомы шума. Если у вас проблемы с обоими ушами, применяйте пластырь за тем ухом, в котором вы ощущаете более сильные симптомы. Хорошо очистите кожу за ухом водой и мылом. Тщательно высушите перед нанесением пластыря Antinitus®, так как, он не прилипнет к жирной или влажной коже.




2. Проверьте упаковку перед использованием, чтобы убедиться, что пластырь не поврежден. Откройте, как показано на рисунке.



3. Снимите защитную пленку с обратной стороны пластыря, как показано на рисунке.

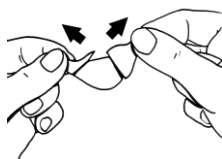

4. Уберите длинные, распущенные волосы одной рукой и нанесите пластырь Antinitus® за ухом другой рукой, как показано на рисунке. Крепко прижмите пластырь, чтобы он хорошо приклеился к коже.

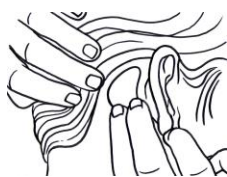

5. Очистите кожу водой и мылом после снятия пластыря Antinitus®. Следуйте инструкциям на рисунках 1–4 при нанесении нового пластыря Antinitus®.

