

## DEUTSCHE GEBRAUCHSANWEISUNG

### Kurze Produktbeschreibung

Antinitus® ist eine Methode zur Linderung von Tinnitusbeschwerden. Es wurde in Schweden nach vielen Jahren Forschung und Studien entwickelt und hergestellt. Antinitus® ist einfach im Gebrauch und wird schmerzfrei angebracht. Antinitus® wird aus Materialien hergestellt, die sanft auf der Haut sind.

Tinnitus ist ein häufiges Problem, das etwa zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung betrifft. Tinnitus ist die Wahrnehmung von Geräuschen in einem oder beiden Ohren oder im Kopf ohne entsprechende externe Klangquelle.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Antinitus verwenden®. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich Ihres Zustandes haben, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.

### INHALT

1. Was beinhaltet eine Verpackung Antinitus®?
2. Wofür wird Antinitus® verwendet?
3. Wie funktioniert Antinitus®?
4. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
5. Wie ist Antinitus® anzuwenden?
6. Aufbewahrung
7. Kontaktinformationen
8. Anwendung

#### 1. Was beinhaltet eine Verpackung Antinitus®?

Die Verpackung enthält eine Innenschachtel mit 21 Antinituspflastern® sowie eine Gebrauchsanweisung.

#### 2. Wofür wird Antinitus® verwendet?

Antinitus® wird für die Linderung von Tinnitusbeschwerden bei **Erwachsenen** angewendet. Antinituspflaster® ist ein Einwegprodukt, das täglich ausgetauscht werden muss, um beste Ergebnisse zu erzielen.

### 3. Wie funktioniert Antinitus®?

Antinitus® ist ein Pflaster, das entwickelt wurde, um die Beschwerden von Tinnitus zu reduzieren. Das Pflaster enthält ein einzigartiges Raster/eine einzigartige Linse, das/die ein strukturiertes Signal erzeugt, das, direkt oder indirekt, Nervenfunktionen im auditorischen System regulieren soll, um die Beschwerden von Tinnitus zu verringern.

Klinische Studien und klinische Erfahrung zeigen, dass Antinitus® Beschwerden des Tinnitus lindern kann und dass Antinitus® sehr sicher in der Anwendung ist.

### 4. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn Sie Tinnitus und eine einseitige Hörbeeinträchtigung (unterschiedliche Hörfähigkeit der Ohren) ohne bekannte Ursache oder pulsierenden Tinnitus (wie Ihr Puls) bzw. andere Gehörsymptome haben, sollten Sie vor Gebrauch von Antinitus® zunächst einen Arzt konsultieren.
  - Antinitus® ist eine Methode nur zur Linderung von Tinnitusbeschwerden.
  - Antinitus® wurde nicht bei Kindern untersucht und sollte daher nicht zur Linderung der Beschwerden von Tinnitus bei Kindern unter 18 Jahren verwendet werden, falls vom Arzt nicht anders verordnet.
  - Antinitus® darf nicht auf geschädigter oder gereizter Haut aufgetragen werden.
  - Wenn die Haut gereizt wird, beenden Sie die Anwendung mit Antinitus®, bis die Reizung aufhört. Die Behandlung kann sofort nach Beendigung der Reizung fortgesetzt werden.
  - Wenn Sie eine allergische Reaktion während der Anwendung mit Antinitus® bekommen, müssen Sie die Anwendung des Produktes beenden und einen Arzt konsultieren.
  - Antinitus® sollte nicht mit anderen Tinnitusbehandlungen kombiniert werden, falls vom Arzt nicht anders verordnet.
  - Antinitus® hat keine bekannten Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und kann verwendet werden, falls vom Arzt nicht anders verordnet.
  - Antinitus® hat keine bekannten Auswirkungen auf Hörgeräte und kann verwendet werden falls vom Arzt nicht anders verordnet.
  - Tinnitusbeschwerden können sich zu Beginn der Behandlung erhöhen, aber in der Regel lassen diese nach einigen Tagen nach.
  - Die Verwendung von Antinitus® wird während der Schwangerschaft oder Stillzeit nicht empfohlen, da keine Studien in dieser Gruppe durchgeführt worden sind.
  - Die Wirkung von Antinitus® ist individuell verschieden und nicht alle Personen sprechen darauf an.
  - Verwenden Sie keine beschädigten Antinituspflaster® oder Pflaster aus beschädigten Verpackungen.
  - Die Pflaster dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### *Allgemeine Informationen:*

- Antinitus® ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt.

### 5. Wie ist Antinitus® anzuwenden?

Befestigen Sie das Antinituspflaster® in der Art und Weise, wie es in den Anweisungen zur ANWENDUNG beschrieben wird. Das Pflaster sollte jeden Tag ausgetauscht und vierundzwanzig Stunden lang getragen werden. Verwenden Sie Antinitus® nicht mehr als einundzwanzig aufeinanderfolgende Tage. Verwenden Sie jeweils nur ein Pflaster.

Kleben Sie das Pflaster hinter das Ohr, an dem die Tinnitusbeschwerden auftreten. Wenn Sie Probleme auf beiden Ohren haben, befestigen Sie das Pflaster hinter dem Ohr mit den meisten Beschwerden. Es ist empfehlenswert, Ihr Pflaster etwa zur selben Tageszeit zu wechseln, z. B. nach dem Frühstück oder nach dem Duschen, damit Sie immer daran denken, ein neues Antinituspflaster® anzubringen.

Das Pflaster muss sofort nach dem Öffnen verwendet und jeden Tag ausgetauscht werden. Das Pflaster darf nicht wiederverwendet werden, weil die Wirkung nicht garantiert werden kann. Da sich Tinnitus bei verschiedenen Menschen unterschiedlich äußert, kann die Wirkung variieren. Eine Erfahrung aus den Studien ist, dass die mildernden Wirkungen nach der Behandlungszeit zunehmen.

Sie können während der Behandlung wie gewohnt leben und brauchen keine Änderungen in Bezug auf beispielsweise Training, Aufenthalt im Haus oder im Freien oder Hochsteckfrisuren vorzunehmen.

#### *Wiederkehrender Tinnitus*

Wenn die Tinnitusbeschwerden nach einem Behandlungszeitraum zunehmen/wiederkommen, kann die Anwendung von Antinitus® vier Wochen nach der letzten Behandlung wiederholt werden.

### 6. Aufbewahrung

Bewahren Sie das Pflaster in der Schachtel an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf (18 °C–25 °C). Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung angegeben. Das Pflaster muss sofort nach dem Öffnen verwendet und jeden Tag gewechselt werden. Gebrauchte Antinituspflaster® können über den normalen Hausmüll oder als brennbarer Abfall entsorgt werden. Schachtel und Gebrauchsanweisung können nach dem Behandlungszeitraum dem Altpapier zugeführt werden.

### 7. Kontaktinformationen

Hersteller:  
Antinitus AB  
Nybrogatan 39  
SE-114 39 Stockholm  
Schweden

Weitere Informationen finden Sie unter [www.antinitus.com](http://www.antinitus.com)

## ANWENDUNG


1. Kleben Sie das Antinituspflaster® hinter das Ohr, an dem die Tinnitusbeschwerden bestehen. Wenn Sie Probleme auf beiden Ohren haben, befestigen Sie das Pflaster hinter dem Ohr mit den meisten Beschwerden. Reinigen Sie sorgfältig die Haut hinter dem Ohr mit Wasser und Seife. Trocknen Sie vor dem Anbringen des Antinituspflasters® die Haut gründlich ab, da es auf fettiger oder feuchter Haut nicht klebt.



2. Überprüfen Sie die Verpackung vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass das Pflaster nicht beschädigt ist. Öffnen Sie wie abgebildet.



3. Ziehen Sie, wie dargestellt, vorsichtig den Schutz auf der Rückseite ab.

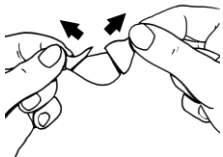

4. Halten Sie langes, offenes Haar mit der einen Hand zur Seite und kleben Sie das Antinituspflaster® mit der anderen Hand hinter das Ohr, siehe Abbildung. Drücken das Pflaster vorsichtig fest, um zu gewährleisten, dass es auf der Haut gut haftet.



5. Reinigen Sie die Haut mit Wasser und Seife, nachdem Sie das Antinituspflaster® entfernt haben. Befolgen Sie die Anweisungen in Abbildung 1–4, wenn Sie ein neues Antinituspflaster® benutzen.

